




Alta definição com feixe horizontal de raios X

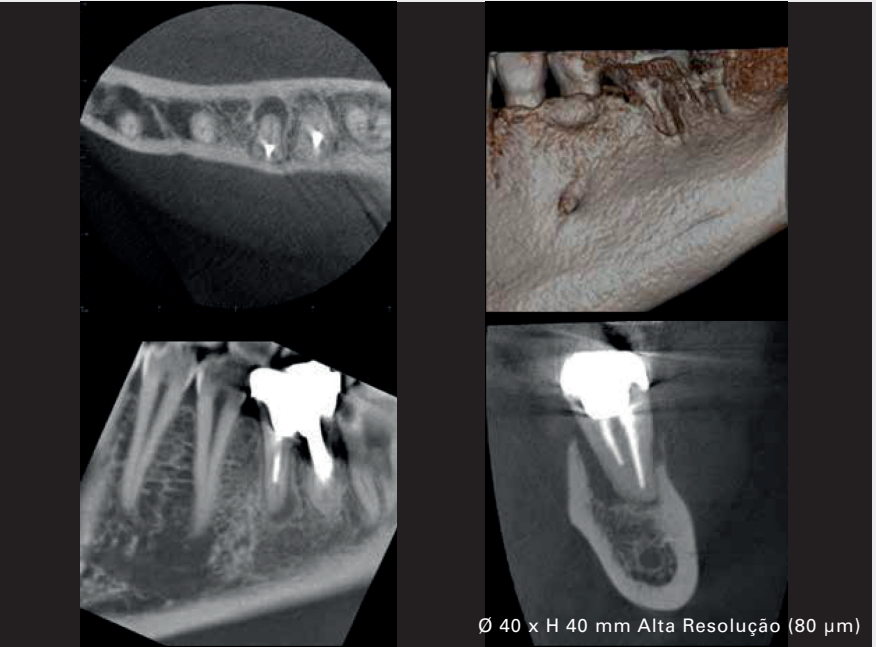




Alta resolução, imagem CBCT com campo limitado
Para exposição com FOV Ø40 x H40 o tamanho do voxel é de 80µm e a resolução é de 2.5 LP/mm. Conforme o exemplo demonstrado acima, os artefatos são reduzidos utilizando o voxel de 80 µm se comparado com uma imagem de 125µm voxel.

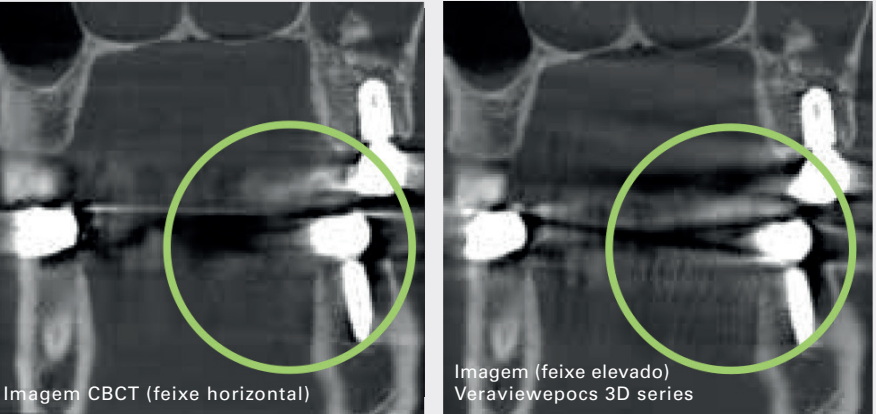

Feixe de raios X horizontal para o mínimo de artefatos
Para exposição CBCT, o feixe de raios X durante a emissão é horizontal, na qual reduz artefatos e distorções.

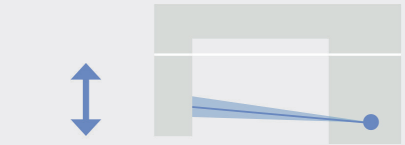

Exposições panorâmicas ajustáveis
Através do deslocamento do Detector Flat Panel (FPD), o ângulo do feixe de raios X pode ser ajustado do feixe horizontal (para exposições CBCT) até 5° para exposições panorâmicas. Este pequeno ajuste suprime o palato nas imagens panorâmicas e assegura uma alta qualidade nos dois tipos de imagens.

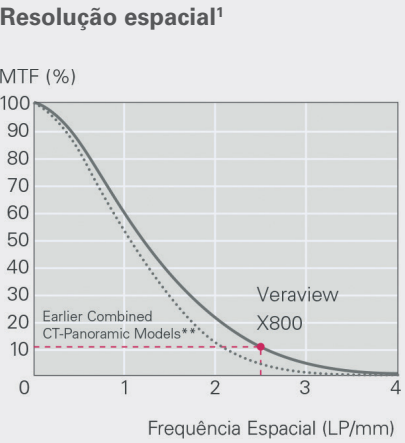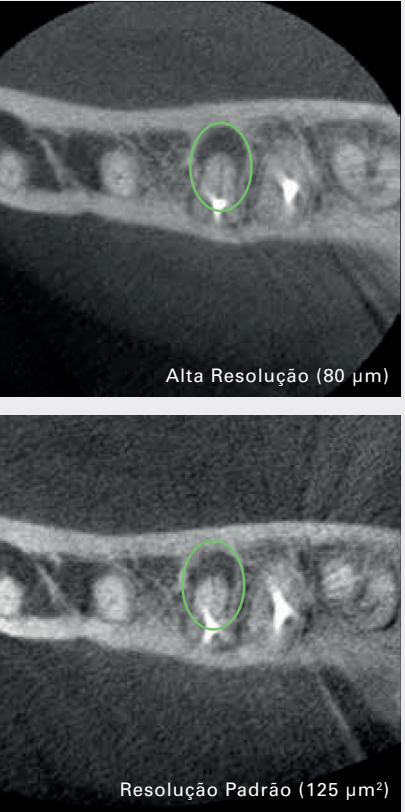
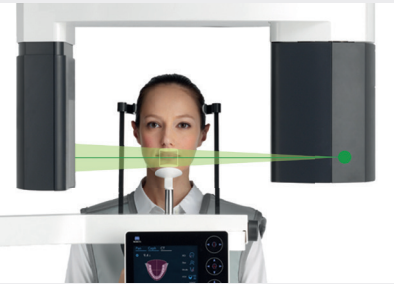


¹ Veraviewpocs 3D Series.
² Resolução espacial é o indicador de quanto um pequeno objeto pode ser, e ainda pode ser visualmente discriminado. É denominado de "frequência espacial" e é usualmente expresso em "pares de linha por milímetro (LP/mm)". Isto indica quantos pares de linha branca e preta pode ser discriminado dentro de um 1 milímetro, quanto maior o valor, MTF é uma das maneiras objetivas de avaliar a resolução de pares de linha e objetivamente expressa a quantidade de pares de linha e qual o nível de contraste que pode ser discriminado. Geralmente se MTF é de 10%, uma discriminação a olho nu é possível. A resolução espacial não depende somente do tamanho do Voxel.

Especificações & Dimensões
Requisitos de espaço operacional

Nome Comercial Modelo Tipo	Veraview X800 X800 F40 / R100 / F150		
Alimentação (Vac)	AC 120V 60Hz ou AC220 / 230/240V50/60Hz		
Consumo de energia	2.0 kVA		
Peso	Aprox. 185 kg (aprox. 220 kg com cefalométrico)		
Fabricante	J. MORITAM FG.CORP		
Voltagem tubo Raio X	60 - 100 kV (de acordo com o modo de exposição)		
Corrente tubo Raio X	2 - 10 mA (de acordo com o modo de exposição)		
Ponto focal nominal	0.5 mm		
Panorâmico – Tempo de exposição	High speed Mode (panorâmico padrão) aprox. 7,4 sec. ou Fine Mode (panorâmico padrão) aprox. 14,8 sec.		
Panorâmico – Regiões (magnificação constante)	Panorâmico padrão (Padrão, Ortográfico, Arcada), Panorâmico pediátrico (Padrão, Ortográfico, Arcada), Maxila, Seios Panorâmico (Anterior, Posterior), ATM quádruplo, Panorâmico parcial, Exposição Bite-wing. <i>A distância medido na imagem panorâmica não é equivalente a distância real.</i>		
CBCT – Tempo de exposição	Aprox. 9,4 sec. (rotação 180°) ou Aprox. 17,9 sec. (rotação 360°)		
CBCT – Área de exposição (FOV)	F40P / F40CP / F40C - Ø40 x H40, Ø40 x H80	R100P / R100CP / R100C - Ø40 x H40, Ø40 x H80 - Ø80 x H40, Ø80 x H50, Ø80 x H80 - R100 x H40, R100 x H50, R100 x H80	F150P / F150CP / F150C - Ø40 x H40, Ø40 x H80 - Ø80 x H40, Ø80 x H50, Ø80 x H80 - R100 x H40, R100 x H50, R100 x H80 - Ø150 x H50, Ø150 x H75, Ø150 x H140
Versão com conjunto cefalométrico	F40CP/F100CP/F150CP		
Dimensão	LA 220 x 250, PA 220 x 200 mm		
Projeção lateral	Com proc. de imagem variável – 5,8 segundos e 4,2 segundos (partial ceph) Sem proc. de imagem variável – 3,5 segundos e 2,6 segundos (partial ceph)		

Utilizar equipamentos de proteção radiológica durante a exposição de raios X. A unidade deve ser fixada na parede e piso quando instalada. Se é utilizado o layout de espaço mínimo, deve prover o mínimo de espaço para circulação.

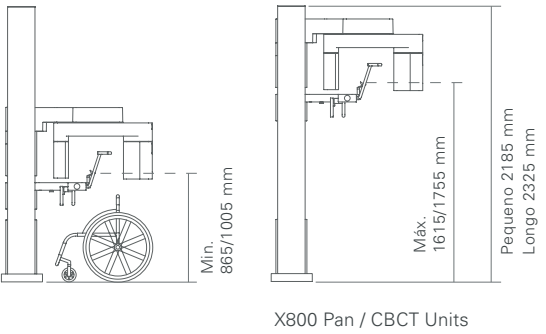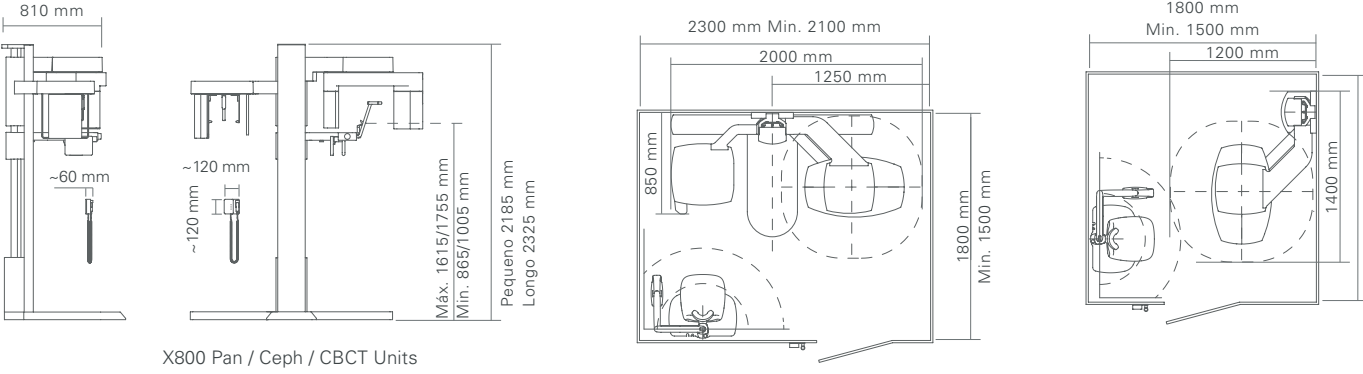

LEIA PELO CELULAR

Veraview X800

A nova fronteira para imagem odontológica

O Veraview X800 é um equipamento de raio X dental all-in-one, que produz imagens panorâmicas, cefalométricas e CBCT deslumbrantes para avaliação. Em alta resolução, esta unidade oferece o voxel mínimo de 80µm e características como feixe de raio X horizontal para a redução de artefatos.

Os dois modos de exposição oferecem controle e flexibilidade através de varredura de 360° de alta definição ou varredura rápida de 180° de rotação com redução de dose, além de uma versatilidade de tamanhos de imagens e características únicas, o Veraview X800 atingiu o ápice da tecnologia em imagem para odontologia.





Pensando à frente. Focado na vida.



LEIA PELO CELULAR

Modo Exposição 360° & 180°

Dependendo da finalidade do diagnóstico, o modo 360° pode ser utilizado para um melhor detalhamento de imagem, ou o modo 180° para uma dose de raios X menor e exposição mais rápida.

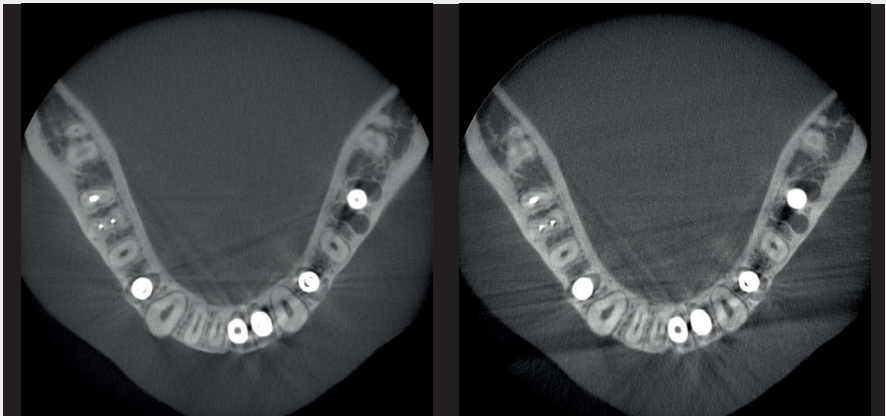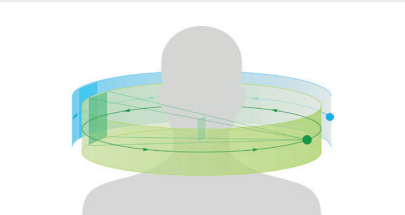

Posicionamento CBCT com Scout

Scout panorâmico

Através da especificação da região de interesse na imagem panorâmica, o posicionamento e exposição para uma área de FOV limitado é muito simples. Isto reduz o stress do paciente. Após fazer uma exposição de CBCT, selecionar com um duplo clique na imagem panorâmica para visualizar os dados daquela região.

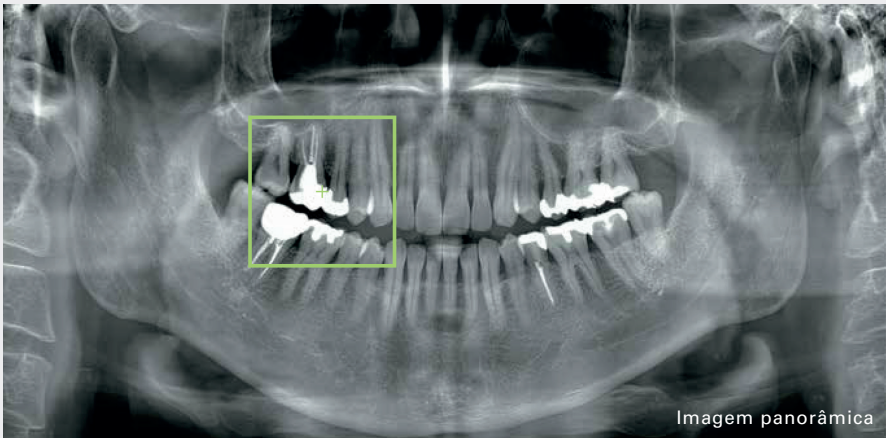


Imagem com segmento Axial

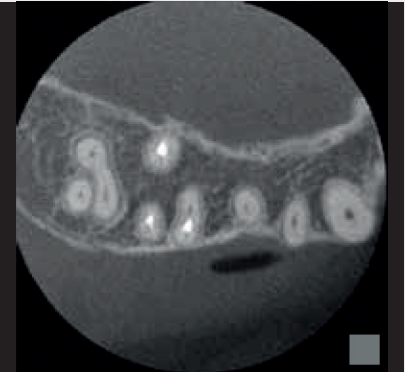
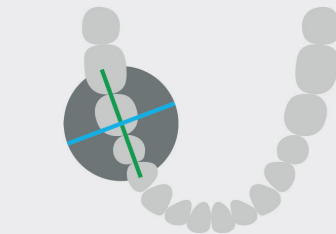


Imagem com o segmento Sagital

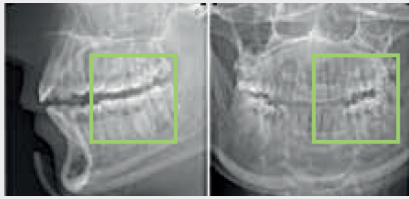


Imagem com o segmento frontal



Scout nas duas direções

A região de interesse é especificada através da imagem capturada frontalmente e lateralmente. Estas imagens são utilizadas para prover um posicionamento preciso nas exposições CBCT com o campo limitado.




Campos de visão diversificados



Função Dental Arch FOV

Formato único de FOV com Ø100 mm, englobando todo o arco dental. A aquisição total da arcada pode ser executada com menor dose de raio X através da exclusão da área externa da região de interesse.

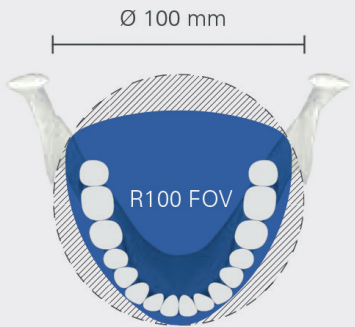

FOV Máximo - Ø150mm

Seu largo FOV de Ø 150 mm permite tomadas completas das arcadas, importante para ortodontia, ATM, observação e tratamento oclusal.

Função Dose Reduction

A dose do paciente pode ser reduzida em até 40%¹ baixando a quantidade de radiação nas áreas com grande transparência como tecido mole.

Função Zoom Reconstruction²

Pela primeira vez, a função Zoom Reconstruction, está disponível em uma unidade multi-funcional. Após a aquisição da imagem com o voxel de 125µm, a reconstrução pode ser refeita para o aumento da resolução para 80 µm sem a necessidade de uma nova exposição.


Múltiplos Fields of View (FOV)

Veraview X800 oferece no total de 11 diferentes FOVs, de Ø 40 até Ø 150. Este equipamento é apropriado para variedade de especialidades e aplicações, tais como ortodontia, implandontia, periodontia e endodontia.

FOV	Tamanho Voxel	Modo 180°	Modo 360°	F40	R100	F150	
Ø 40 x H 40 Alta Resolução	0,080 mm	○	○	○	○	○	*1 R100: Dental Arch FOV (equivalente a Ø100). *2 Dados utilizados equivalente a exposição de 180° graus. *3 Duas exposições de 36° graus. Superior e inferior. *4 Dados utilizados equivalente a exposição de 180° graus.
Ø 40 x H 40	0,125 mm						
Ø 40 x H 80							
Ø 80 x H 40	0,125 mm	○	○	-	○	○	
Ø 80 x H 80							
Ø 80 x H 80							
R 100 x H 40 *1	0,125 mm	○	-	-	○	○	
R 100 x H 50 *1							
R 100 x H 80 *1							
Ø 150 x H 50 *2	0,320 mm	-	○	-	-	○	
Ø 150 x H 75 *2							
Ø 150 x H 140 *3							


¹ Comparada quando a função "Dose Reduction" está desligada. ² Esta função não poderá ser utilizada em exposição com Ø 150.

Imagem Panorâmica e suas opções

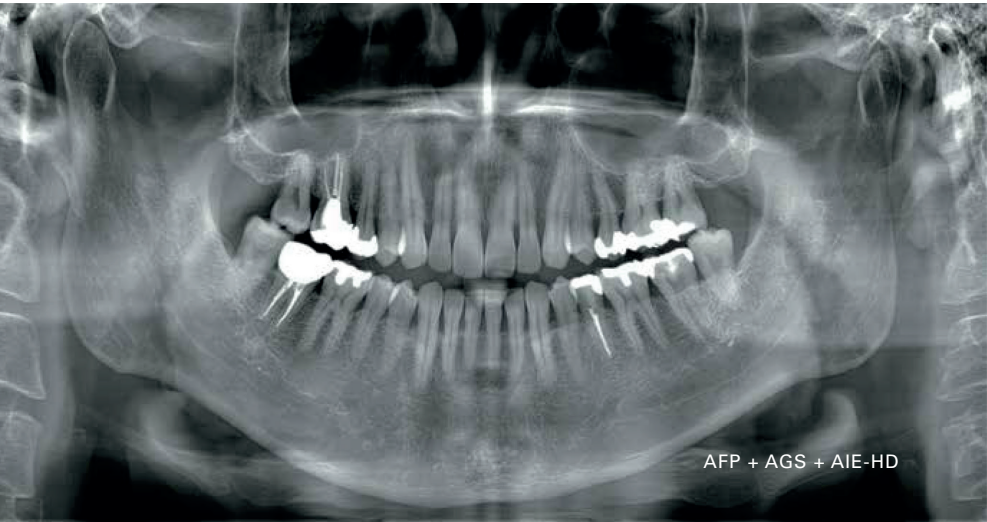


AFP (Adaptive Focal Point)

Esta função melhora o foco e a nitidez para imagem obtida por exposição de camada. Toda região da ápice das raízes dos incisivos irá ficar no foco.

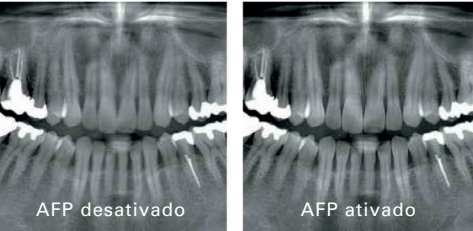

AGS (Adaptive Gray Scale)

AGS ajusta automaticamente a densidade para fazer uma imagem panorâmica clara na totalidade, incluindo a arcada dental, ATM, seios, etc.

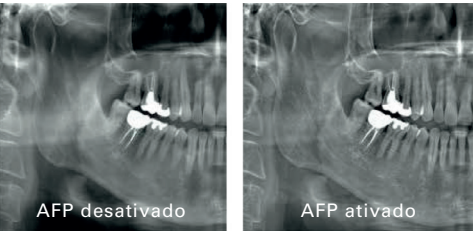

AIE-HD (Auto Image Enhancement)

Esta função otimiza a imagem panorâmica processando e tornando todos detalhes nítidos e claros.

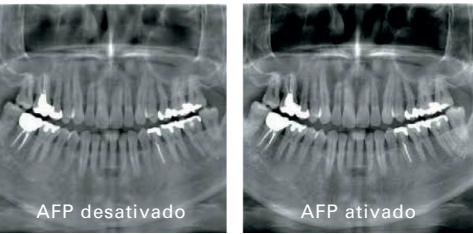


Imagem panorâmica consistente com qualidade e definição

Várias funções como AFP (Adaptive Focal Point), AGS (Adaptive Gray Scale), e AIE-HD (Auto Image Enhancement - High Definition) podem ser combinadas para obter imagens com uniformidade com focos nas áreas de interesse de uma maneira clara para análise. Adicionalmente, o clínico pode escolher entre 03 tipos de camadas de imagens para combinar com a dentição do paciente.

Panorâmica pediátrico

Para crianças com arcada pequena, a escala de dose é menor diminuindo a exposição ao paciente.



Panorâmica Padrão

O feixe do raio X cruza a arcada dentária perpendicularmente para reduzir a sobreposição dos dentes vizinhos.




Panoramica "Shadowless"

Esta função reduz a "sombra" causada pelo ramo da mandíbula do lado oposto.



Panorâmica Parcial

Caso não necessite de uma imagem panorâmica total, pode ser feito de uma região específica. Excluindo partes da arcada dentária, a dose de raios X é reduzida.

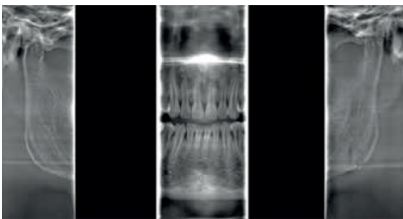

Exposição Bite-wing

Esta função é útil para os problemas periodontais ou cáries em espaços interproximal dos pré-molares e molares.

